

Cechy monitorów Avalon FM20 i FM30

Uchwyt transportowy



6.5 calowy kolorowy ekran dotykowy (TFT)

Monitorowanie ruchów płodu (standard)

Zapis do pamięci (standard)

Złącza do monitorowania płodu

Złącza do monitorowania matki: NIBP i SpO₂



Kompaktowy i lekki

33.5 x 28.6 x 13.3 cm

5.1 kg

Regulowany kąt ustawienia
ekranu



Opcje zamocowań



Mocowanie ścienne



Wózek




Podstawa rolkowa

Ergonomiczna i miła w dotyku obudowa przetworników

Kombinacja Toco i EKG



Uniwersalny zacisk do pasa

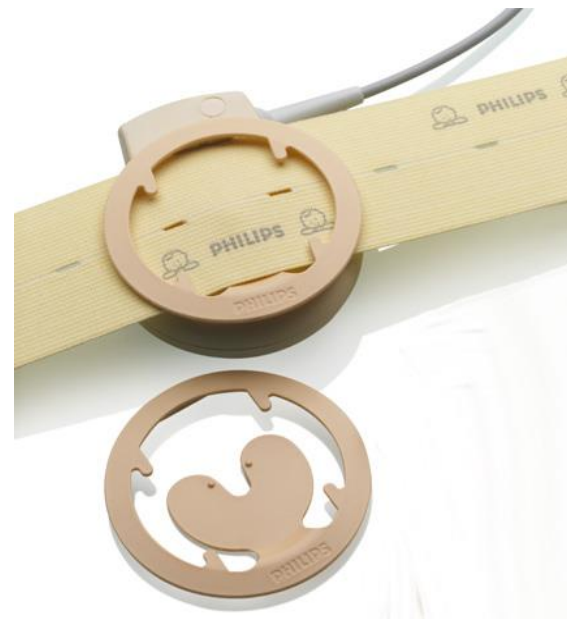

Automatyczne rozpoznawanie przetwornika

- Możliwość wykorzystania 4 złącz przetworników
- Niezależnie od użytego gniazda system automatycznie rozpoznaje konkretny przetwornik
- Przetworniki:
 - US (maks. 3)
 - Toco
 - Moduł pacjenta (IUP, MEGG, DECG)
 - Znacznik zdarzeń



Wykonywane pomiary i cechy monitora




	FM20 Monitor przedporodowy (metody nieinwazyjne)	FM30 Monitor śródporodowy (metody nieinwazyjne oraz inwazyjne)
FHR (także bliźniaki), Toco	✓	✓
FHR (trojaczki)	opcja	opcja
Inwazyjne pomiary: DECG i IUP	-	✓
MHR (matczyne elektrody Ekg)	✓	✓
EKG matki	-	✓
NIPB	opcja	opcja
SpO2	-	opcja
Detekcja ruchów płodu	✓	✓
Ekran dotykowy	✓	✓
Pamięć (1h)	✓	

Łatwy w obsłudze – Ekran dotykowy

Nazwisko pacjenta i numer identyfikacyjny

Timer NST

Jakość sygnału

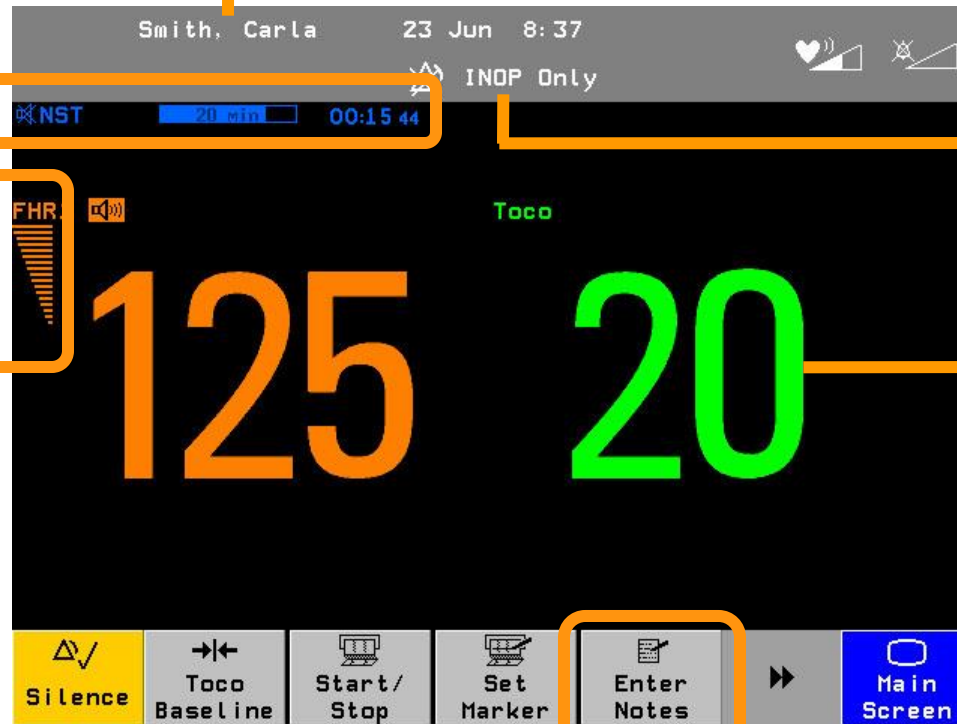


Alarmy

Duże cyfry


Notatki

Automatyczna konfiguracja ekranu

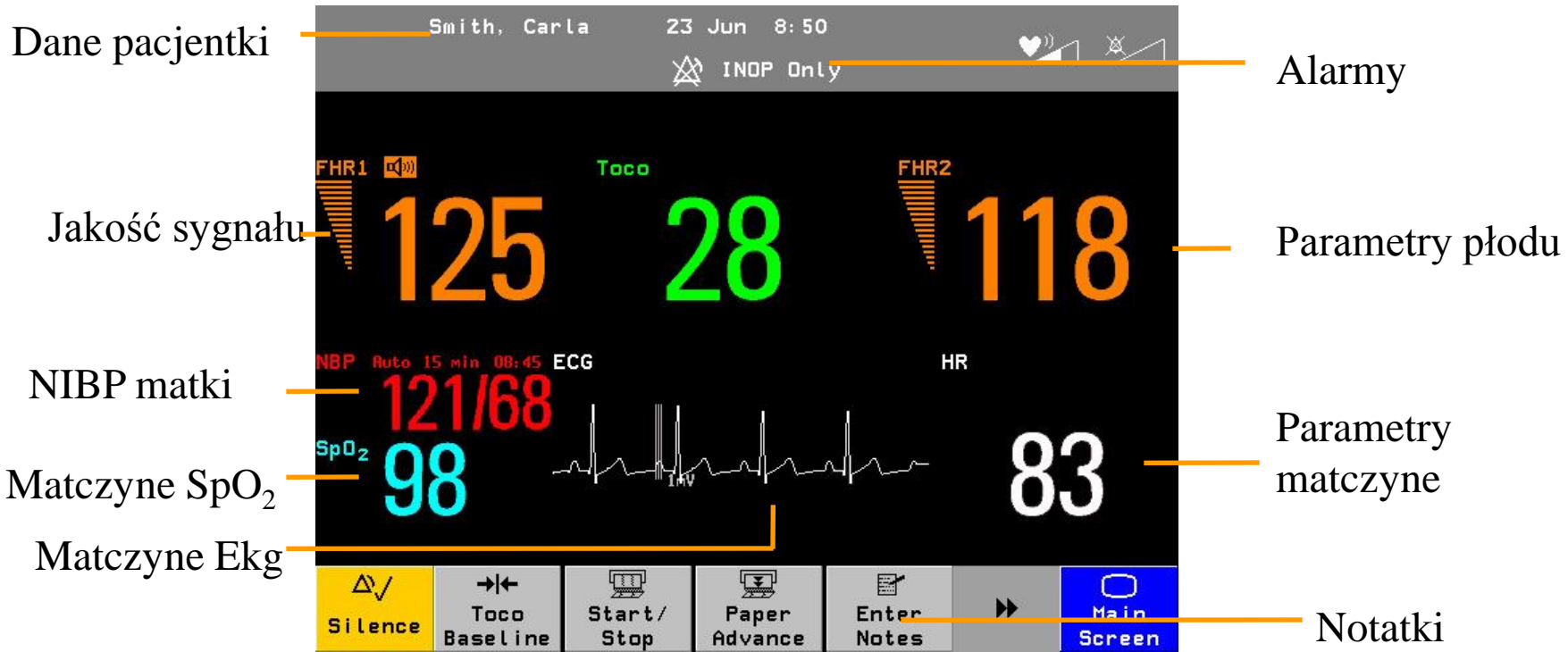

Przyciski (zależne od konfiguracji monitora)

Ekran dotykowy – blokada ekranu

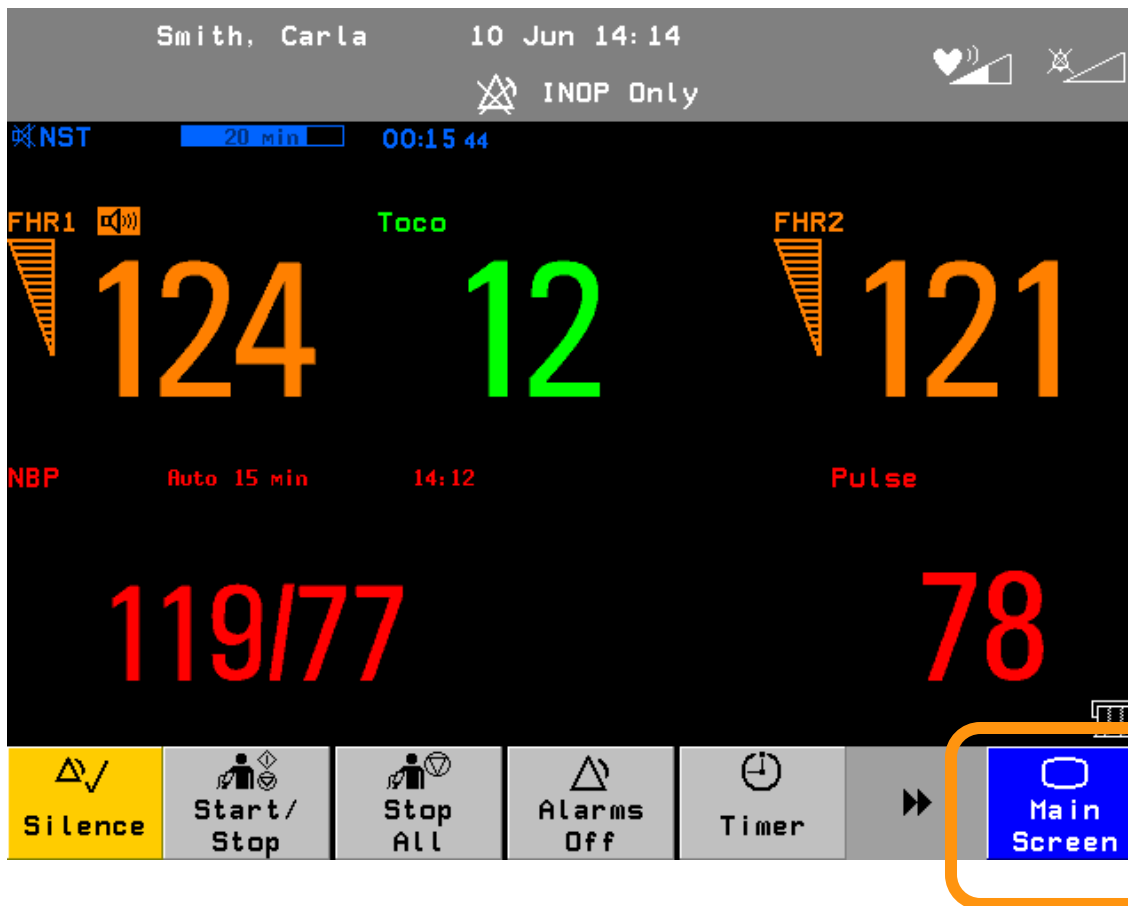

Naciśnij i przytrzymaj przez > 3 s

Wyszukiwanie przetwornika



Wpisywanie danych personalnych



Klawiatura na
ekranie


lub osobna

PS/2 Klawiatura



Weryfikacja międzykanałowa

- Porównywanie wszystkich rytmów w celu wyszukiwania koincydencji
 - Pomiedzy 3 płodami
 - Oraz matką
 - Dotyczy FM20 and FM30
- Minimalizuje ryzyko monitorowania martwego płodu

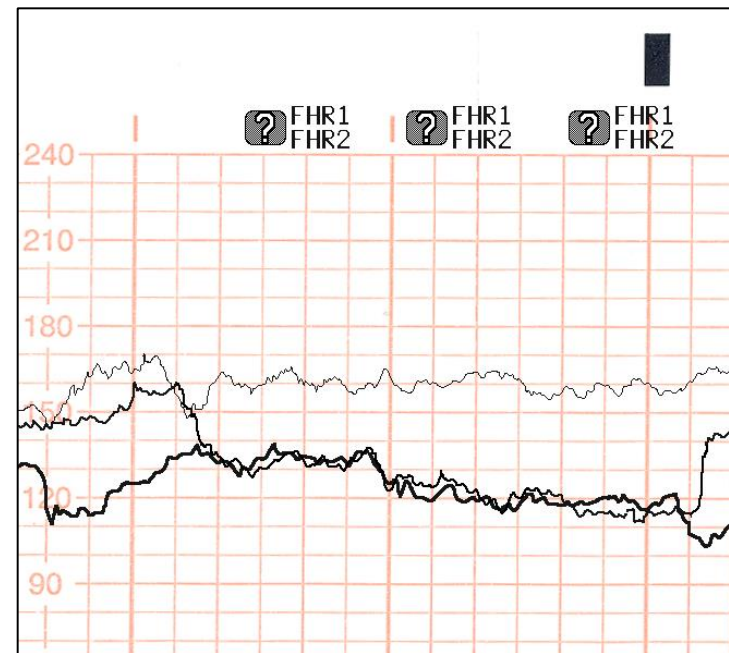

Podsumowanie

- Kompaktowy i lekki
- Ekran dotykowy
- 6.5 calowy kolorowy wyświetlacz TFT
- Duża czcionka
- Wyszukiwanie przetwornika
- Automatyczne rozpoznawanie przetwornika
- Monitor FM20 (przeporodowy) z opcją NIBP
- Weryfikacja międzykanałowa
- Monitorowanie trojaczków
- Pamięć
- Opisywanie zapisów i wprowadzanie danych osobowych pacjentki
- Różne rodzaje zamocowań